

New!

Hybrid TWISTER

Frezy hybrydowe twistery

Eurpoa-Patent-Nr. 1157627
Gebrauchsmuster-Nr. 202013006268.1

European-Patent-No. 1157627
Utility Model No. 202013006268.1

Brevet européen n° 202013006268.1
Modèle d'utilité n°202013006268.1

Numer patentu europejskiego: 1157627
Wzór użytkowy nr: 202013006268




Zwei überaus wirkungsvolle Werkstoffe - Diamant und Keramik- verbinden sich zu einer progressiven neuen Körnung: der Hybridkörnung.

Two exceedingly effective materials - diamond and ceramic - combine to yield a progressive new hybrid grit.

Deux matières particulières efficaces - le diamant et la céramique - s'associent pour former un nouveau grain hybride progressif.

Dwa nowoczesne materiały - diament i ceramika łączą się w jedną nowoczesną ziarnistość: ziarnistość hybrydową.

Anwendung / Application / Application / Zastosowanie

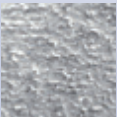Körnung Grit Grain Ziarnistość	R.E.M (30x) D.S.M. (30x) M.E.B. (30x) M.E.R. (30x)	*) Korngröße (µm), Mittelwert *) Grit size (µm), mean value *) Taille de grain (µm), moyenne *) średnia struktura (wielkość) krystalitów(µm),	Farbkennzeichnung Color-code Code couleurs Oznaczenia kolorystyczne	Einsatzbeispiele Work area Domaine d'application Przykładowe zastosowanie
grob coarse gros gruboziarnisty		300	grüner und weißer Ring <input type="radio"/> green and white ring <input checked="" type="radio"/> anneau vert et blanc <input checked="" type="radio"/> zielona i biała	Abtragen dicker Hornschwielen Removal of thick horn callus Abrasion des Hyperkératoses Mocny, szybko usuwa najgrubszą skórę
mittel medium moyen średnioziarnisty		150	blauer und weißer Ring <input type="radio"/> blue and white ring <input checked="" type="radio"/> anneau bleu et blanc <input checked="" type="radio"/> niebieska i biała	Entfernen starker Verhornungen Removal of hard callus Abrasion des callosités durs Średni, szybko usuwa grubą skórę
fein fine fin drobnoziarnisty		60	roter und weißer Ring <input type="radio"/> red and white ring <input checked="" type="radio"/> anneau rouge et blanc <input checked="" type="radio"/> czerwona i biała	Entfernen beginnender Verhornungen Removal of incipient callus Abrasion des premières callosités Łagodny, usuwa skórę w początkowej fazie rogowacenia.

Diamantschleifer Diamond instruments Instruments diamantés Frezy diamentowe

Anwendung / Application / Application / Zastosowanie

Körnung Grit Grain Ziarnistość	R.E.M (30x) D.S.M. (30x) M.E.B. (30x) M.E.R. (30x)	*) Korngröße (µm), Mittelwert *) Grit size (µm), mean value *) Taille de grain (µm), moyenne *) średnia struktura (wielkość krystalitów (µm),	Farbkennzeichnung Colour-code Code couleurs Oznaczenia kolorystyczne	Einsatzbeispiele Work area Domaine d'application Zastosowanie
mega grob mega coarse mega gros bardzo mocny gruboziernisty		500	2 schwarze Ringe ●● 2 black rings 2 bagues noires 2 czarne obrączki	Abtrag dicker Hornschwielen Removal of thick horn callus Abrasion des Hyperkératoses Twister, szybko usuwa najgrubszą skórę
super grob super coarse super gros mocny gruboziernisty		300	schwarzer Ring ● black ring bague noire czarna obrączka	Entfernen starker Verhornungen Removal of hard callus Abrasion des callosités durs Twister, szybko usuwa grubą skórę
grob coarse gros gruboziernisty		125 - 181	grüner Ring ● green ring bague verte zielony	Entfernen beginnender Verhornungen und grobe Nagelbearbeitung Removal of incipient callus and coarsely nail treatment Abrasion des premières callosités et dégrossissage de l'ongle Diamantowy, usuwa skórę w początkowej fazie rogowacenia i służy do obróbki paznokci
mittel medium moyen średnioziarnisty		90 - 125	ohne Ring without ring sans bague bez obrączki	Hornhaut und Nagelglättung Callus and nail smoothening Lissage des callosités et des ongles Diamantowy, zbiera i wyrównuje nierówności skóry i paznokci
fein fine fin drobnoziarnisty		30 -50	roter Ring ● red ring bague rouge czerwony	Feinbearbeitung von Haut und Nägeln Delicate treatment of cuticle and nails Traitement de finition de la peau et des ongles Diamantowy, wygładza powierzchnie skóry i paznokci
extra fein extra fine extra fin bardzo drobnoziarnisty		15	gelber Ring ● yellow ring bague jaune żółty	Feinstbearbeitung von Haut/Vorpolitur von Nägeln Delicate treatment of cuticle/prepolishing of nails Super-finition de la peau/prépolissage des ongles Diamantowy, wygładza przed polerowaniem paznokci

*) Die Korngröße ist optimal abgestimmt auf übliche Anwendungsgebiete, Umdrehungszahlen, Formen und Größen der Diamantschleifer und kann im Mittelwert bei einzelnen Instrumenten abweichen.

*) The grit size is optimally adjusted to usual applications, speed, sizes and shapes of the diamond instruments but may differ in the mean value for individual instruments.

*) La taille de grains est adaptée, de façon optimale, aux différentes applications, vitesses de rotation, formes et diamètres des instruments diamantés, et peut différer de la moyenne dans le cas de certains instruments.

*) El tamaño de grano adaptado, de manera óptima, a las aplicaciones, velocidades, formas y diámetros de los instrumentos diamantados y su valor medio puede diferir en algunos instrumentos en particular.






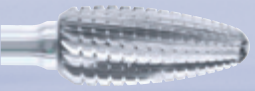

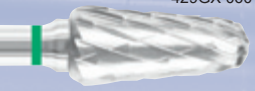

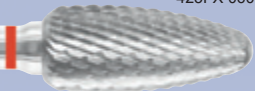

Hartmetall-Fräser

Carbide Cutters

Fraises en carbure

Frezy stal chirurgiczna

Anwendung / Application / Application / Zastosowanie

Verzahnungsart Type of cuts Type de denture Uzębienie	Instrumentenbeispiel Examples of instruments Exemples d'instruments Przykłady frezów	Einsatzbeispiele Work area Domaine d'application Przykładowe zastosowanie
SPEED-Verzahnung SPEED-Cut SPEED-Denture SPEED	T426SPEED 060 	Spezialverzahnung für Nägel mit passiver Sicherheit, mittlere Abtragsleistung Special cut for nails, with passive safety, medium cutting performance Pour ongles, denture spéciale avec sécurité passive, puissance d'abrasive moyenne Frez ma średnie uzębienie. Stosowany podczas pedicure do usuwania i wyrównywania grubej skóry oraz do usuwania miejsc zajętych grzybicą na paznokciach. Bardzo dobrze sprawdza się przy ściąganiu takich materiałów na paznokciach jak żel albo akryl
SPEED PLUS-Verzahnung SPEED PLUS-Cut SPEED PLUS-Denture SPEED PLUS	T426SPEED PLUS 060 	Spezialverzahnung für Nägel mit passiver Sicherheit, hohe Abtragsleistung Special cut for nails, with passive safety, strong cutting performance Pour ongles, denture spéciale avec sécurité passive, haute puissance d'abrasive Frez ma mocne uzębienie. Stosowany podczas pedicure do usuwania grubej skóry oraz do usuwania miejsc zajętych grzybicą na paznokciach. Bardzo dobrze sprawdza się przy ściąganiu takich materiałów na paznokciach jak żel albo akryl
Grobe gerade schnittfreundige Verzahnung mit Querhieb (GQSR) Coarse straight cut with cross cut Denture droite grosse avec taille transversale Mocne uzębienie poprzeczne	424GQSR 060 	Grobes Beschleifen von Hyperkeratosen und Orthesenkunststoffen Strong grinding of Hyperkeratosis and Orthesis silicones Abrasion forte des hyperkératoses et des résines pour orthèses Służy do usuwania najgrubszej grubej skóry oraz do obróbki ortez i materiałów protetycznych
Mittlere Verzahnung mit Querhieb (MQS) Coarse medium cut with cross cut Denture droite moyen avec taille transversale Średnie uzębienie poprzeczne	425MQS 060 	Feines Beschleifen von Hyperkeratosen und Orthesenkunststoffen Gentle grinding of Hyperkeratosis and Orthesis silicones Abrasion fine des hyperkératoses et des résines pour orthèses Służy do usuwania, wyrównania i gładzenia skóry oraz do szlifowania ortez i materiałów protetycznych
Sehr grobe X-Verzahnung (SGX) Very coarse double cut Denture croisée très grosse Bardzo mocne uzębienie krzyżowe	429SGX 060 	Starker Substanzabtrag massiv verdickter Nägel Strong removal of thickened nails Réduction de substance forte des ongles massivement épaissis Szybko usuwa twarde zrogowacenia na paznokciach. Nadaje się do tzw. zdrewniałych paznokci
Grobe X-Verzahnung (GX) Coarse double cut Denture croisée grosse Mocne uzębienie krzyżowe	429GX 060 	Grobe Formgebung verdickter Nägel Coarse modeling of thickened nails Façonnage des ongles épaissis Służy do obróbki grubych paznokci
Mittlere X-Verzahnung (X) Medium double cut Denture croisée moyenne Średnie uzębienie krzyżowe	425X 060 	Gezielte Konturierung formveränderter Nägel Specific outlining of nails with changed shapes Pour le contour ciblé des ongles déformés Służy do nadawania i modyfikowania kształtu paznokci
Feine X-Verzahnung (FX) Fine double cut Denture croisée fine Łagodne uzębienie krzyżowe	425FX 060 	Feinbearbeitung vorbehandelter Nägel Delicate treatment of prepared nails Traitement de finition des ongles prétraités Służy do wygładzania powierzchni paznokci
Spezial Nagel Cut (SNC) Special Nail Cut Denture spéciale pour ongles SNC uzębienie specjalne	431SNC 065 	Spezialverzahnung für besonders glatte Oberflächen Special cut for very smooth surfaces Denture spéciale pour des surfaces particulièrement lisses Specjalne, a zarazem bezpieczne uzębienie stosowane jest do gładkich powierzchni w manicure i pedicure

New!

KERA Keramikfräser
KERA Ceramic cutters
KERA Fraise en céramique
KERA Frezy ceramiczne

Dt. Patent angemeldet 10 2013 225 947.6
 German patent pending 10 2013 225 947.6
 Brevet allemand demandé 10 2013 225 947.6
 Numer patentu 10 2013 225 947.6

Die spezielle weiße Hochleistungskeramik der neuen KERA Fräser Serie ist ein neues HighTech Material für rotierende Instrumente der BUSCH Premium Klasse.

The special white high-performance ceramic of the new KERA cutter range is a new high-tech material for Premium Class rotary instruments from BUSCH.

La céramique blanche haute performance de la nouvelle série des fraises KERA est un nouveau matériau de technologie de pointe pour les instruments rotatifs Premium BUSCH.

La cerámica blanca de alto rendimiento especial de la línea nueva KERA es un material „high-tech“ de los instrumentos rotativos Premium de BUSCH.

Anwendung / Application / Application / Zastosowanie

Verzahnungsart Type of cuts Type de denture Ziarnistość	Instrumentenbeispiel Examples of instruments Exemples d'instruments Zdjęcie przykładowego frezu	Einsatzgebiet und Arbeitsgang Used on and working process Domaine d'application et phase de travail Zastosowanie
SPEED-Verzahnung SPEED-Cut SPEED-Denture SPEED		SPEED-Spezialverzahnung mit passiver Sicherheit, empfehlenswert bei Diabetikern Special SPEED cut with passive safety, recommended for diabetic patients SPEED-denture spéciale avec la sécurité passive, recommandée pour les patients diabétiques Frez ma średnie uzębienie poprzeczne. Stosowany do bezpiecznego usuwania i wyrównywania skóry i paznokci, również u diabetyków
Mittlere X-Verzahnung Medium double cut Denture croisée moyenne Średnie uzębienie poprzeczne Grobe gerade Verzahnung, Querhieb Coarse straight cut, cross cut Denture droite grosse avec taille transversale Mocne uzębienie poprzeczne		X-Verzahnung mit hoher Abtragsleistung Double cut with high abrasion performance Denture X avec un pouvoir abrasif élevé Służy do nadawania i modyfikowania kształtu paznokci GQSR-Verzahnung mit sehr hoher Abtragsleistung GQSR cut with very high abrasion performance Denture-GQSR avec un pouvoir abrasif très élevé Służy do usuwania najgrubszej grubej skóry oraz do obróbki ortez i materiałów protetycznych


Stahl-Fräser, rostsicher
Stainless steel cutters
Fraises en acier inoxydable
Frezy z białej stali nierdzewnej



Zur besseren Identifizierung.
For a better identification.
Pour une meilleure identification
Dla lepszej identyfikacji.

Anwendung / Application / Application / Zastosowanie

Verzahnungsart Type of cuts Type de denture Ziarnistość	Instrumentenbeispiel Examples of instruments Exemples d'instruments Zdjęcie przykładowego frezu	Einsatzbeispiele Work area Domaine d'application Zastosowanie
Mittlere Verzahnung Medium cut Denture moyenne Średnie uzębienie	<p>1RS 023 75RS 060</p>	<p>Entfernen von Hämatomen und Hühneraugen unter der Nagelplatte Removal of haematoma and corns under the nail surface Énucléation des hématomes et des cors sous unguéaux Frezy służą do usuwania krwiaków pod paznokciowych i odcisków w obrębie naturalnej płytki paznokciowej</p> <p>Wirksame Nagelbearbeitung Efficient nail treatment Traitement efficace de l'ongle Skuteczna obróbka paznokci</p>
Mittlere Verzahnung, Querhieb Medium cut, cross cut Denture moyenne, taille transversale Średnie uzębienie poprzeczne	<p>11RS 023 85RS 060</p>	<p>Bearbeitung von Verhornungen und Hühneraugen Treatment of very thick calluses and corns Traitement de kératoses et cors Frezy służą do usuwania zrogowaceń i odcisków</p> <p>Zügiges Abtragen von Hornhaut Fast abrasion of callus Abrasion rapide de callosité Służą do szybkiego usuwania grubej skóry</p>
Feine Verzahnung, Querhieb Fine cut, cross cut Denture fine, taille transversale Łagodne uzębienie poprzeczne	<p>95RS 060</p>	<p>Glätten von Hornhaut Smoothing of callus Lissage de callosité Frezy służą do wyrównywania i gładzenia skóry</p>
Hohlfräser Hollow instruments Fraise creuse Frezy próżniowe	<p>225RS 023</p>	<p>Entfernen von Hühneraugen, Schwielen und Ausfräsen von Hornhautrillen Removal of corns, calluses and to ream callus grooves L'énucléation de cors, kératoses et traitement des sillons cornés Frezy służą do usuwania odcisków, modzeli i mocno zrogowaciałych bruzd na skórze (np. pękające pięty)</p>
Polygonales Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden Polygonal working part without sharp blades Partie travaillante polygonale sans coupants Poligonalne, wielokątne	<p>406L-RS 012</p>	<p>Entfernung von Nagelfalzablagerungen und überstehender Nagelhaut Removal of nail fold deposits and protruding cuticles Enlèvement du dépôt des sillons et de la cuticule Przeznaczone są do usuwania skórek okołopaznokciowych</p>

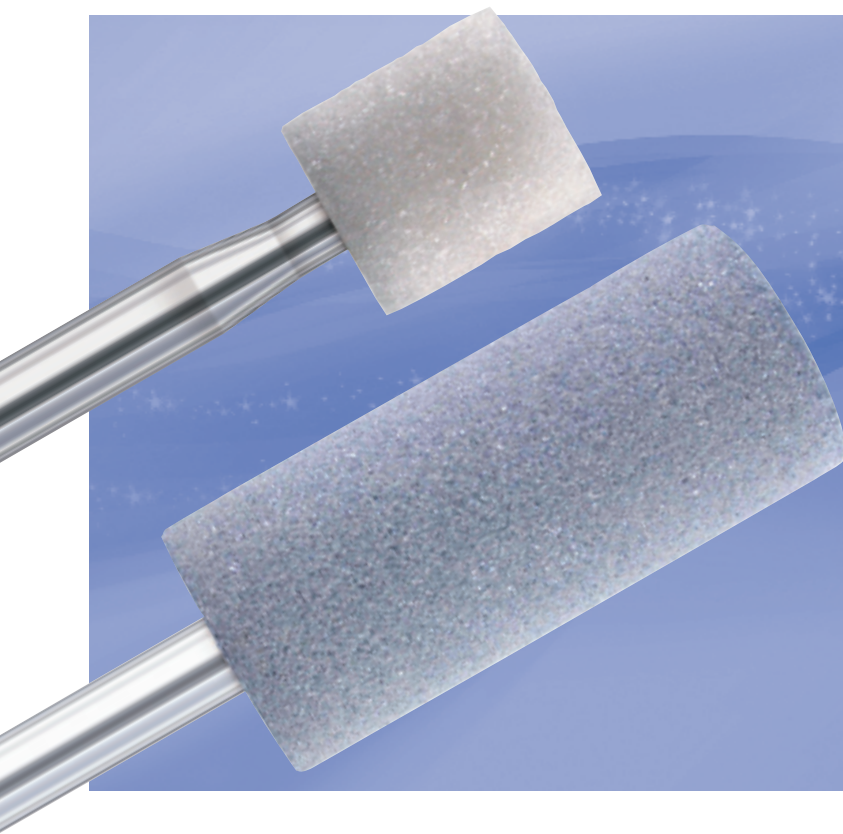

Schleifkörper, Polierer,
Bürsten und Polierpaste

Abrasives, Polishers,
Brushes and Polishing paste

Abrasifs, Polissoirs,
Brosses et Pâte à polir

Frezy kamienne i polerskie

Anwendung / Application / Application / Zastosowanie

Material Material Matériau Materiał	Instrumentenbeispiel Examples of instruments Exemples d'instruments Zdjęcie przykładowego frezu	Einsatzgebiet und Arbeitsgang Used on and working process Domaine d'application et phase de travail Zastosowanie
Edelkorund, rosa High-grade corundum, pink Corindon affiné, rose Naturalny korund, różowy	 652 033	Für feine Schleifarbeiten an Nagel und Haut For fine grinding work on nail and cuticle Pour l'abrasion fine de l'ongle et de la peau Frezy służą do delikatnej obróbki skóry i naturalnej płytki paznokciowej
Edelkorund, weiß High-grade corundum, white Corindon affiné, blanc Naturalny korund, biały	 524 055	Nagelprothetik und Spangentechnik Nail prosthetics and brace technique Prothèse d'ongle et l'orthonyxie Frezy służą w protetyce paznokci i technice ortonyksyjnej
Silikonbindung Silicone bond Liaison silicone Silikonowe	 9629 080	Vorpolitur von Nägeln und Nagelprothesen Prepolishing of nails and nail prosthesis Prépolissage des ongles et des prothèses d'ongle Służą do szlifowania i wyrównywania paznokci naturalnych, akrylowych i rekonstrukcji paznokci
	 9625 080	Glanzpolitur von Nägeln und Nagelprothesen High-lustre polishing of nails and nail prosthesis Polissage spéculaire des ongles et des prothèses d'ongle Służą do nadawania połysku paznokciom naturalnym, akrylowym i rekonstrukcji paznokci